

# MODE D'EMPLOI DE MOVAPO<sup>MC</sup>

DOSE : \_\_\_\_\_ mg



A : Sélecteur de dose et piston avec une flèche indiquant le dosage sélectionné  
**Important** – Ne le tirez pas avant d'avoir sélectionné la dose à administrer.

B : Chiffre indiquant la dose par injection (1 à 10 mg)

C : Quantité totale de Movapo<sup>MC</sup> dans le stylo (en mg)

D : Capuchon

E : Aiguille

F : Membrane

G : Protège-aiguille

H : Unité scellée contenant l'aiguille, le protège-aiguille et le cône protecteur




## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Les aiguilles jetables du stylo doivent être utilisées une seule fois, puis jetées dans votre contenant pour objets tranchants ou pointus. Ne partagez jamais vos aiguilles.
- N'utilisez pas le stylo si la solution dans la cartouche est trouble, verdâtre ou si elle contient des particules.
- Quand vous commencez à utiliser un stylo de Movapo<sup>MC</sup>, celui-ci peut être utilisé pendant un maximum de 48 heures s'il est conservé à la température ambiante. Jetez le stylo dans votre contenant pour objets tranchants ou pointus. 48 heures après sa première utilisation.
- N'utilisez pas le stylo après la date de péremption, soit le dernier jour du mois indiqué sur l'étiquette.
- Conservez à 25 °C (l'entreposage entre 15 et 30 °C est acceptable).
- Rangez le stylo dans sa boîte d'origine pour le protéger de la lumière.
- Gardez le stylo hors de la portée et de la vue des enfants.

## CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER

- Un (1) stylo de Movapo<sup>MC</sup>
- Une (1) aiguille [L'emballage de Movapo<sup>MC</sup> ne contient pas d'aiguille. Vous pouvez utiliser les mêmes aiguilles que celles recommandées pour les stylos d'insuline.]
- Deux (2) tampons d'alcool
- Un (1) contenant en plastique rigide (comme un contenant pour objets tranchants ou pointus) pour jeter les aiguilles. Vous pouvez vous en procurer un à la pharmacie.

## ÉTAPE 1 : FIXER L'AIGUILLE

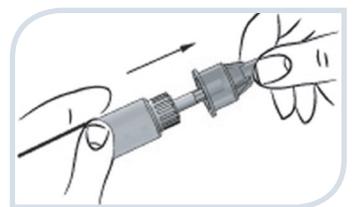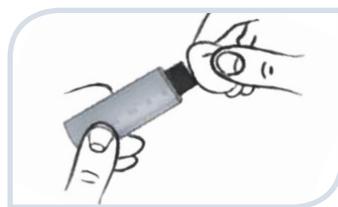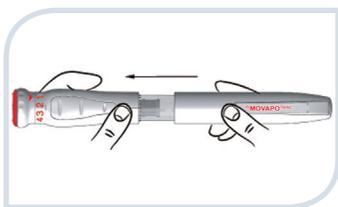


- Sortez le stylo de la boîte et retirez le capuchon.
- Nettoyez la membrane avec un tampon d'alcool.
- Retirez le papier du cône protecteur.
- Fixez le cône à la membrane en le vissant vers la droite (dans le sens horaire). Cela permet d'attacher l'aiguille de façon sécuritaire au stylo.
- Retirez le cône protecteur. Ne le jetez pas.
- Ne retirez pas le protège-aiguille tout de suite.
- Remettez le capuchon du stylo en place.

- **REMARQUE** : Il est important d'installer le cône protecteur de l'aiguille dans l'axe du stylo afin de fixer l'aiguille de façon sécuritaire. Si le cône protecteur est installé et fixé à angle, le stylo pourrait fuir.

# MODE D'EMPLOI DE MOVAPO<sup>MC</sup>

## ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER LA DOSE

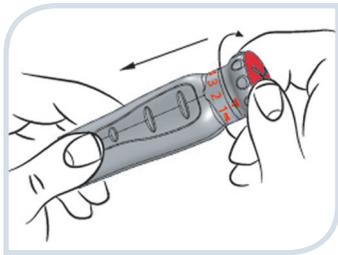

- Appuyez sur le sélecteur de dose et tournez-le vers la droite (dans le sens horaire) jusqu'à ce que la flèche pointe sur la dose prescrite.
- Relâchez la pression sur le sélecteur de dose. La dose est maintenant sélectionnée. **Vous n'aurez plus à sélectionner la dose pour les injections suivantes.**
- Ne jamais tirer et tourner le sélecteur de dose en même temps.


**IMPORTANT :** Si vous dépassez la dose à sélectionner, continuez d'appuyer et de tourner dans le même sens jusqu'à ce que vous reveniez à la dose désirée.

Si votre dose est de 1 mg, il sera nécessaire d'« amorcer » le stylo avant d'injecter la première dose.

- D'abord, chargez la dose (voir l'étape 3).
- Puis retirez le protège-aiguille.
- Finalement, appuyez sur le sélecteur de dose aussi loin que possible afin de vider la première dose de 1 mg dans un mouchoir de papier.




Si votre première dose est supérieure à 1 mg, il n'est pas nécessaire d'« amorcer » le stylo.

## ÉTAPE 3 : CHARGER LA DOSE

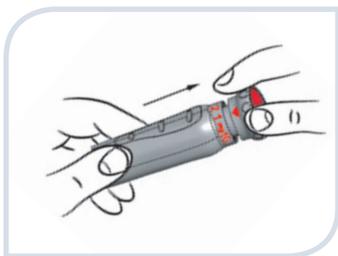

- Chargez votre dose en tirant le sélecteur de dose aussi loin que possible; vous devriez alors voir apparaître une échelle graduée sur le piston.
- Le chiffre le plus élevé que vous voyez sur le piston doit correspondre à la dose que vous avez sélectionnée sur le sélecteur de dose. Cela permet de s'assurer que la bonne dose a été chargée. **N'injectez votre dose que si le chiffre apparaissant sur l'échelle graduée est le même que celui figurant sur le sélecteur de dose.**
- Ne tentez jamais de changer la dose lorsque le stylo est en position de charge. En cas d'erreur dans la sélection de la dose, éliminez la dose incorrecte dans un mouchoir en papier puis sélectionnez la bonne dose. Suivez les directives données à l'« Étape 2 : Sélectionner la dose » une autre fois.

## ÉTAPE 4 : INJECTER LA DOSE

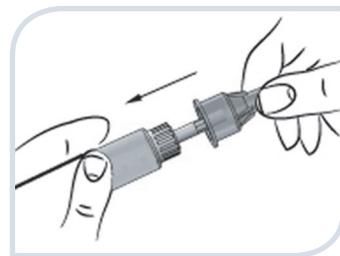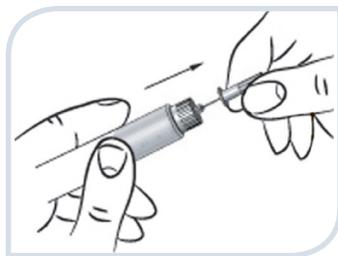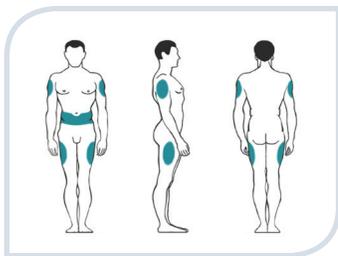

- Votre médecin vous montrera, à vous ou à votre aidant, comment injecter la dose correctement.
- Vous devez changer de point d'injection **chaque fois** que vous injectez Movapo<sup>MC</sup> afin d'aider à éviter les réactions au point d'injection.
- Choisissez un endroit sur votre abdomen, la partie supérieure de vos bras ou de vos cuisses.
- Demandez à votre médecin comment vous y prendre pour injecter Movapo<sup>MC</sup> dans des endroits qui vous sont plus difficilement accessibles.
- À l'aide d'un tampon d'alcool, nettoyez la peau à l'endroit prévu pour l'injection.


- Retirez le capuchon du stylo.
- Retirez le protège-aiguille.

- Insérez l'aiguille dans la peau comme on vous l'a montré.
- Appuyez à fond sur le sélecteur de dose en utilisant votre pouce. Une fois le sélecteur de dose bien enfoncé, comptez jusqu'à trois avant de retirer l'aiguille de la peau.

Retirez et jetez l'aiguille :

- attachez le cône protecteur à l'aiguille en le poussant doucement;
- une fois le cône en place, dévissez l'aiguille en tournant vers la gauche (dans le sens antihoraire);
- puis jetez l'aiguille dans un contenant de plastique rigide.

## ÉTAPE 5 : PRÉPARER LE STYLO POUR LA PROCHAINE INJECTION

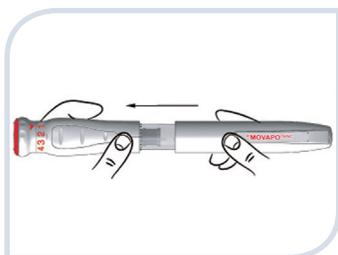

- Assurez-vous qu'il reste assez de Movapo<sup>MC</sup> dans la cartouche pour votre prochaine injection.
- Si c'est le cas, suivez les instructions de l'étape 1 et fixez une nouvelle aiguille sur le stylo. Remettez le capuchon en place et n'oubliez pas de conserver le cône protecteur.
- Si la cartouche ne contient pas suffisamment de Movapo<sup>MC</sup> pour une autre injection, préparez un nouveau stylo (suivez les étapes 1 et 2).